


Rack Magnética para tubos de 15 mL

Código: EC-MAGRACK-15
Marca: Nova Biotecnologia

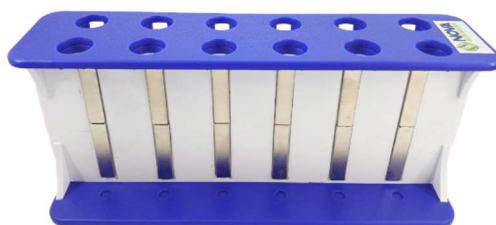

Descritivo

A Rack Magnética para tubos de 15 mL é um dispositivo utilizado para a separação rápida e eficiente de partículas magnéticas (beads magnéticas) presentes em amostras biológicas e químicas.

O equipamento utiliza ímãs permanentes de alta intensidade para atrair as beads para a parede do tubo, permitindo a remoção ou troca do sobrenadante sem perda do material ligado às partículas magnéticas.

Principais funções:

- ✓ Separação de beads magnéticas durante processos de purificação;
- ✓ Extração de DNA, RNA e proteínas;
- ✓ Lavagem e eluição de amostras;
- ✓ Processos de imunoprecipitação e captura molecular.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864

Especificações Técnicas

- ✓ Compatível com tubos cônicos de 15 mL;
- ✓ Ímãs permanentes de alta potência;
- ✓ Não requer alimentação elétrica;
- ✓ Separação rápida das partículas magnéticas;
- ✓ Capacidade até 12 tubos.

Dimensões:

- ✓ Altura: 10 cm;
- ✓ Largura: 6,0 cm;
- ✓ Comprimento: 23,5 cm;
- ✓ Peso: 0,40 Kg.



(11) 4243-2356



novabiotecnologia.com.br



vendas@novabiotecnologia.com.br



R. Pasadena, 235 - Parque Industrial San José
Cotia/SP - Cep: 06715-864